

取扱説明書 (お客様保管用)



メガネ用 ステンレス小ネジキット(479PCS)

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



ご使用上のお願い

- ・本製品は使用頻度の高いメガネ用小ネジをセットした補修用キットです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・本製品は多岐に渡るメガネ用ネジから使用頻度の高いネジを専門店の監修のもとセット化し、ネジの破損や紛失などの応急修理を前提に部品選定を行っています。メガネの純正ネジと規格や素材が完全に一致しない場合もあるため、本来の性能や強度を損なう場合があります。メガネは身体に着用するものですので原則として応急用として使用し、必要に応じて専門店にご相談の上、純正部品への交換修理を実施してください。
(本製品は汎用のネジ部品ですので、恒久的な使用はお客様のご判断と責任のもと行ってください)
- ・本製品を使用した修理にはメガネ本体や破損状況に応じた専門的かつ適切な判断が必要です。十分に注意を払いながら部品の選定と交換作業を行ってください。ネジを回す際は、オーバートルク(締めすぎ)による破損にご注意ください。
- ・ネジの太さや長さは十分に確認し、正しいサイズのネジを使用してください。また、ネジの再使用は避け、変形、折損、錆びたネジは絶対に使用しないで下さい。強度に悪影響を及ぼし思わぬ破損や怪我につながる恐れがあります。
- ・本製品は汎用のメガネ用小ネジキットです。使用方法や強度や特性等において誤った部品選定、修理方法、点検不足などによって損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- ・振動や衝撃でネジが緩む可能性があるため、定期的に点検をして緩みが無いか確認した上でネジの締め直し（増し締め）をしてください。ネジ緩み止め剤の塗布も有効です。（ネジ緩みは部品の落下や紛失の恐れがあります。）
- ・適正な締付け工具を使用して下さい。不適切な工具の場合、ねじやメガネ本体の破損、怪我、締付け不足による部品脱落の恐れがあります。
- ・メガネやサングラス以外の特殊な医療機器等への目的外使用はおやめください。
- ・保管時は劣化防止のため湿度の低い乾燥した場所で、直射日光の当たらない屋内等に保管してください。
- ・本製品は耐候性や劣化に強い素材を採用しておりますが、一定の経年劣化やネジの緩みなどは避けられません。
- ・使用環境・条件によりサビや腐食等が発生する場合があります。定期的なお手入れを行い適切にご使用ください。
- ・破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品を加工・分解・修理しないでください。
- ・ネジは非常に小さいため、幼児の手の届く場所に保管しないでください。誤って飲み込むと危険です。
- ・お客様または第三者が本製品の誤った使用、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について当社は一切の責任を負いかねます。

製品情報：ネジ材質：ステンレス(SUS201) 付属品：精密ドライバー、ピンセット、メガネ拭き

製品仕様

ネジ径	ネジ長さ(首下)	数量	用途例
1.0mm	4.0mm	各20本	ノーズパッド修理・固定用
1.2mm	4.0mm	各20本	
1.4mm	2.2/2.6/2.8/3.0/3.4/3.8 4.5/5.5/6.0/8.0/10.0mm	各20本	テンプル蝶番・レンズ固定部用
1.7mm	4.0/6.0/8.0/10.0mm	各20本	主にテンプル蝶番部用
①金属ワッシャー(1.4mmネジ用)		20枚	テンプル蝶番・レンズ固定部用
②金属ナット(1.4mmネジ用)		20個	テンプル蝶番・レンズ固定部用
③金属袋ナット(1.4mmネジ用)		20個	ツーポイントレンズ固定部用
④ナイロンキャップ(1.4mmネジ用)		20個	ツーポイントレンズ固定部用
⑤ナイロンワッシャー(1.4mmネジ用)		20枚	ツーポイントレンズ固定部用
⑥ナイロン段付ワッシャー(1.4mmネジ用)		20枚	ツーポイントレンズ固定部用
⑦ノーズパッドA(プラスチック製)		8個	ノーズパッド修理・交換用
⑧ノーズパッドB(シリコン製中空タイプ)		8個	ノーズパッド修理・交換用


使用方法

本製品は汎用ネジキットです。主に応急処置を目的としており、必要に応じて純正部品・専門店やメーカーによる修理を行ってください。メガネ等の修理には専門的な知識と技術が必要です。

1. 修理したいメガネを良く確認し、適切なサイズの小ネジやパーツを選定します。
2. 付属のピンセットを用いて慎重にパーツをケースから取り出してください。
3. 付属のピンセットと精密ドライバーなどを使用し、部品の交換・取り付けを行って下さい。
4. パーツは紛失に注意して、ネジを締める際は締めすぎによる破損に注意してください。
5. ツーポイント式のメガネのレンズ固定部は適切なパーツと順番で組立を行ってください。
6. パーツ交換後はメガネが正常に使用可能か十分確認し、問題があれば再確認してください。




■鼻パッドの修理

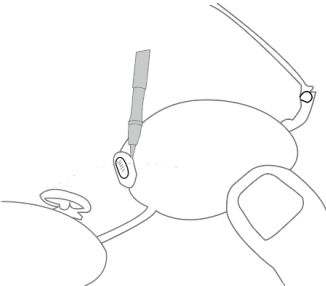

■標準的なツーポイントの修理

■テンプル蝶番の修理

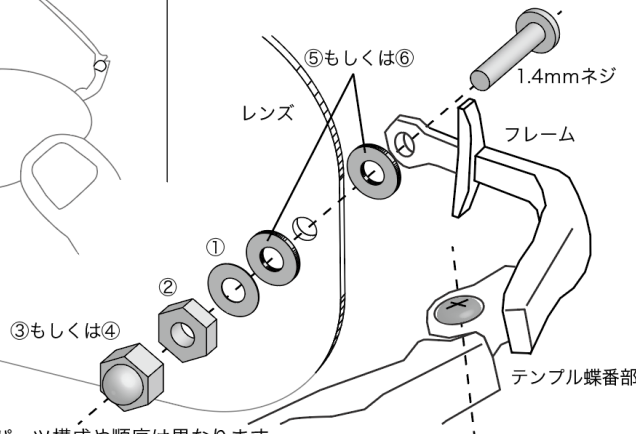

※メガネの仕様によりパーツ構成や順序は異なります。

■メガネ拭きによるクリーニング方法


1. メガネ拭きは汚れが少ない場所から拭いていきます。
 2. レンズのクリーニングが終わったらテンプル（つる）部を拭き、最後に鼻パッドを拭いて完了です。
- 注意：肌に直接当たる鼻パッドは、皮脂やメイクで特に汚れがたまりやすい場所のため最後に拭くことで汚れを広げることなくクリーニングできます。

■メガネ拭きのお手入れについて

繊維を傷めるため、中性洗剤、もしくはおしゃれ着用洗剤を使用することをお勧めします。漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。塩素系の漂白剤は繊維を傷める原因となります。柔軟剤を使用すると汚れや水分の吸収性が低下し、メガネ拭きの拭き取り効果が低下する場合があります。

■精密ドライバーの使用方法

分解することでプラス＆マイナスドライバー、六角ナットの締付用として使用可能です。

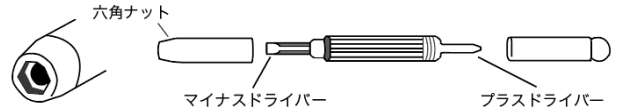

製品	メガネ用 ステンレス小ネジセット(479PCS)	製品型式	NBSS130-EGS1-479SSV
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- ①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp 公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)